



## 产品简介

真空手套箱是将高纯惰性气体充入箱体内，并循环过滤掉其中的活性物质的实验室设备。也称手套箱、惰性气体保护箱、干箱等。



不锈钢真空手套箱



不锈钢真空手套箱

## 工作原理

真空手套箱主要由主箱体和底座组成，如用户有其它特殊要求，也可以根据需要进行设计或改造；箱体上有二到三个手套操作接口，操作箱迎面为有机玻璃，视角广阔无死角，操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程，使得操作过程较直观地展现在操作者的眼前。箱体上有二个真空球阀，用户可根据需要使用。球阀的内外安装接水嘴，在需要通水或通气的情況下可由此接入。箱体内装了照明灯泡和多孔插座。


## 特点

- 1、整个箱体由不锈钢制成，并作加固处理，表面喷塑，所以坚固耐腐蚀易清洗；
- 2、操作箱迎面为钢化玻璃，视角广阔无死角；
- 3、箱内配照明灯和多孔插座可用电炉进行局部加热；
- 4、操作手套采用厚乳胶手套密封可靠耐用；
- 5、密封装置设计新颖，密封可靠，开启方便；
- 6、内外装有水嘴可进水、进气；
- 7、过渡室两个门解决了对主箱体反复抽真空的问题。



不锈钢真空手套箱

## 编号介绍

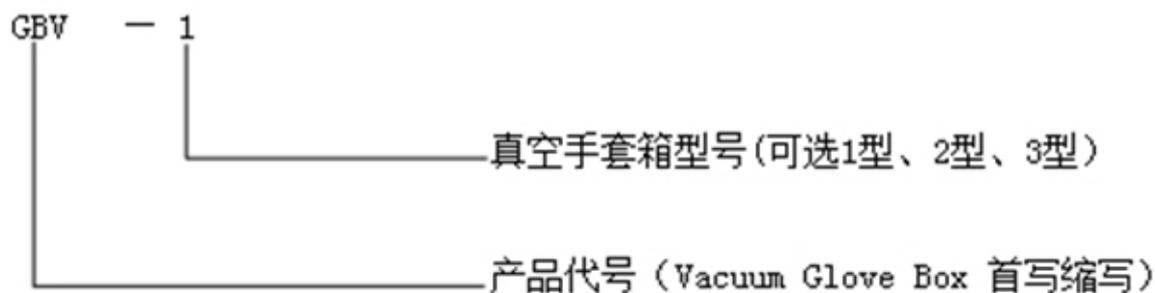

## 技术参数

部位名称 \ 产品型号	GBV-1	GBV-2	GBV-3
外形LxWxH(MM)	1030*570*530	1295*715*675	1755*776*1010
箱体L1xW1xH1(MM)	600*500*500	800*650*650	1200*700*950
箱体内部净空间	460*345(上) 490(下)x490	660*460(上) 640(下)x640	660*460(上) 640(下)x640
过渡仓 (MM)	φ200*280	φ273*350	φ350*400
左侧开门尺寸 (选配)	330*260	360*480	400*600
过渡仓抽屉 (选配)	126*250	202*320	282*350
工具仓 (选配)	无	无	φ150*300
手套孔 (MM)	φ150	φ150	φ196
箱体工作压力范围	0~-0.1Mpa,保压时间12小时		

